

Masážní přístroj na krk

Typ ovládání hlasem + odstranění




Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku, abyste porozuměli správnému používání a obsluze.

Schéma produktu

15 převody	240g hmotnost	6 režimy
4-drive synchronous massage	42 °C horký kompresor s konstantní teplotou	Hlasové vysílání Dálkové ovládání

Kontrolka

* Modrá kontrolka svítí po zapnutí * Červená kontrolka svítí při nabíjení

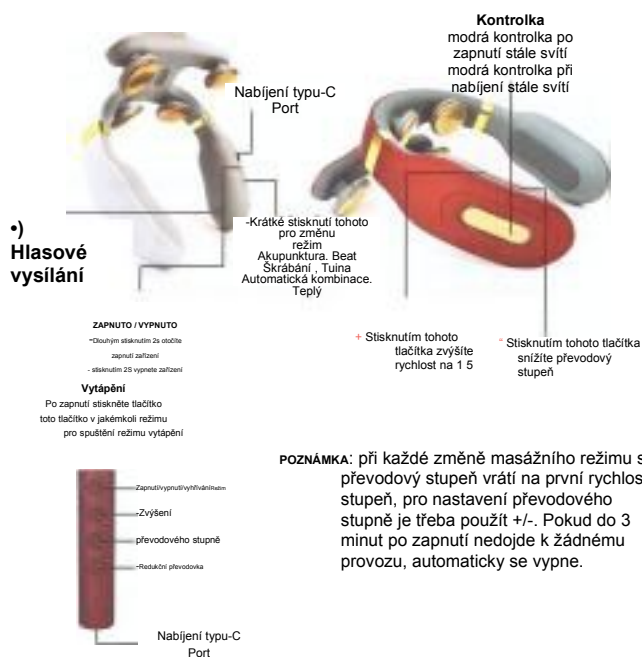

POZNÁMKA: při každé změně masážního režimu se převodový stupeň vrátí na první rychlostní stupeň, pro nastavení převodového stupně je třeba použít +/-, Pokud do 3 minut po zapnutí nedojde k žádnému provozu, automaticky se vypne.

Model	Masážní přístroj na krk
Jmenovité napětí	DC5V/1A
Hodnocení výkonu	1.5 W
Kapacita baterie	1500mAh

Nabíjení

- Zapojení dodaného kabeluTYPE C-USB do zařízení
- Použijte USB2.0 stranu kabelu do USB nabíjecí cihly (výstup je 5V1A/2A).
-Při nabíjení bude indikátor nabíjení blikat a po úplném nabití blikat přestane.

Bezpečnostní opatření

1. Masážní přístroj na krk se po 3 minutách nečinnosti automaticky vypne. Doporučuje se doba používání 15 minut a ne více než 30 minut denně..
2. Masážní přístroj na krk by měl být skladován na dobře větraném a suchém místě, pokud se nepoužívá.
3. Nepokládejte na masážní přístroj těžké předměty.
4. Kabel USB nevytahujte násilím, aby nedošlo k jeho poškození.

Problémy a řešení

- Pokud se při používání tohoto produktu setkáte s problémy, přečtěte si následující tipy a řešení.
- Pokud následující návrhy nefungují, vypněte výrobek a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Uživatelé nesmějí zařízení sami rozebírat nebo opravovat, protože tím ztrácejí platnost záruky na výrobek a může dojít k jeho nefunkčnosti, přičemž my neneseme žádné následky způsobené touto situací.

2

Problémy	Důvody a řešení
Nelze spustit	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je vybitá. Nabijte zařízení. - Ujistěte se, že jste správně stiskli tlačítko zapnutí/vypnutí.
Nelze nabíjet nebo kontrolka nabíjení neblíká	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je linka USB dobře připojena k výrobku a napájecímu adaptéru.
Žádný pocit, ale výrobek funguje normálně	<ul style="list-style-type: none"> • - Zkontrolujte, zda se elektrody dotýkají přímo kůže. Upravte polohu tak, aby se elektrody dobře dotýkaly kůže. • - Zkontrolujte, zda se mezi elektrodami a kůží nenachází vlasy, oblečení nebo jiné příslušenství. Pokud tam nějaké předměty jsou, odstraňte je.
Pocit brnění	<ul style="list-style-type: none"> • -Zkontrolujte, zda jsou elektrody v dobrém kontaktu s kůží. • -Možná používáte tento výrobek příliš dlouho během jednoho dne. Doporučuje se používat pouze dvakrát denně a vždy 15 minut. • -Síla může být příliš vysoká. Stisknutím tlačítka snižte intenzitu. • -Můžete být alergičtí na materiály elektrod. • -Zimní počasí nebo suchá pokožka. Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že je vaše pokožka vlhká.
Slabá stimulace	<ul style="list-style-type: none"> • -Zkontrolujte, zda elektrody dobře přiléhají ke kůži. Upravte jejich polohu a/nebo sílu. • -Není na elektrodách nečistota nebo olej? Očistěte povrch elektrod. • -Nízké nastavení síly. Stisknutím tlačítka "+" zvýšte sílu.

3

Operace

1. Před použitím nejprve navlhčete krk a rameno vodou a poté si výrobek nasadíte na krk, ujistěte se, že elektrody těsně přiléhají k pokožce. Nakonec přístroj otevřete a nastavte odpovídající sílu masáže.
2. Nejprve dlouze stiskněte tlačítko napájení na dvě sekundy, uslyšíte hlas "Welcome and Enjoy" (Vítejte a užívejte si), k ovládní použijte odstraňovací ovladač. přístroj je ve výchozím nastavení v automatickém režimu kombinace. Stisknutím tlačítka "~" nastavte režim. Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte sílu až na maximální sílu (stupeň 15). Stisknutím tlačítka "-" sílu snížíte. chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte "thanks for using", což znamená, že je zařízení vypnuto.
3. Přeloženo pomocí www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze).
4. Hostitel je zapnutý po dobu 15 minut, pokud výrobek není normálně nošen, výrobek se automaticky vypne za 3 minuty.

Varování

Nebezpečí

Nepoužívejte společně s následujícím zdravotnickým vybavením:

1. Jakýmkoli implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je kardiostimulátor nebo defibrilátor,
2. Zdravotnickým zařízením pro podporu života, jako jsou umělé kardiopulmonální přístroje,
3. Zdravotnické vybavení, jako je elektrokardiograf.

Varování

1. Pokud uživatel používá spolu s tímto výrobkem vysokofrekvenční chirurgické zařízení, mohou elektrodové hlavice tohoto výrobku způsobit popáleniny na pokožce nebo poškození výrobku.
2. Pokud je tento výrobek používán v blízkosti krátkovlnného nebo mikrovlnného léčebného zařízení (1M), může být výstup výrobku nestabilní. Please avoid using this product on body parts with wounds or scars.
3. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti srdce.
4. Doporučuje se, aby jej používal jeden uživatel. Při křížovém použití uživatelé před použitím očistí elektrody na výrobku.
5. Ujistěte se, že elektroda je těsně přiložena ke kůži a zcela se dotýká kůže.
6. Elektrodový plech tohoto výrobku má funkci ohřevu. Dlouhodobé (více než 15 minut) používání horkého obkladu na stejné části může způsobit opaření vysokou teplotou.
7. Pokud se během používání nebo po něm objeví fyzické potíže, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se s lékařem.
8. Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Přístroj nerozebírejte, znovu nenasazujte, neponožte ani nevhazujte do ohně, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo výbuchu.
9. Pokud při používání tohoto výrobku pocítíte jakékoliv potíže, okamžitě přestaňte výrobek používat.
10. Pokud se vaše tělo nebo pokožka po použití tohoto výrobku cítí neobvykle, poraďte se s lékařem a postupujte podle jeho pokynů.
11. Pokud chcete při masáži přemístit kus elektrody nebo jiné osoby, nezapomeňte před přemístěním vypnout napájení, jinak můžete dostat silný elektrický šok.
12. Při používání tohoto výrobku nenoste žádná jiná elektronická zařízení (např. elektronické hodinky), protože by mohlo dojít k poruše tohoto výrobku.
13. Pokud se tento výrobek začne během používání porouchávat, okamžitě jej vyjměte. Obratě se na zákaznický servis a požádejte o konzultaci.
14. K zapojení nebo odpojení nabíjecího kabelu USB nepoužívejte mokré ruce, protože by mohlo dojít k náhodnému úrazu elektrickým proudem.
15. Přístroj nepoužívejte u dětí nebo osob, které nemohou dobrovolně vyjádřit své vědomí, protože by mohlo dojít k nehodám nebo fyzickému nepohodlí.
16. Nepoužívejte toto zařízení při koupání, sprchování nebo v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození tohoto výrobku.
17. Zařízení nepoužívejte ve spánku, protože by mohlo dojít k poruše. Kromě toho se elektrody mohou během spánku posouvat, což by mohlo způsobit fyzické nepohodlí.
18. Nepoužívejte jej při řízení, protože může způsobit nadměrnou

stimulaci a nepohodlí.

19. Nepokládejte elektrody na infikovanou kůži, protože to může způsobit zánět kůže.
20. Při používání výrobku se vyhněte kontaktu tohoto zařízení s jakýmkoliv předměty obsahujícími kov, protože může dojít k silnému úrazu elektrickým proudem.
21. Tento výrobek noste na krku a ramenou pouze v souladu s jeho určením.
22. Odpojte kabel USB nabíječky přidržím hlavice USB. Neodpojujte kabel tahem za něj, aby nedošlo k jeho poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
23. Hlavice elektrod se při používání zahřívají. Pokud jste citliví na teplo, poraďte se před použitím tohoto výrobku s lékařem.
24. Je normální, že pokožka, která byla v kontaktu s elektrodami, je po použití tohoto výrobku horká na dotek.

V následujících případech se před použitím poraďte s lékařem.

1. Lidé, kteří podstupují lékařskou léčbu.
2. Lidé s onemocněním srdce nebo nervů.
3. Lidé, kteří mají horečku (vyšší než 38 °C).
4. Lidé s infekčním onemocněním.
5. Lidé, kteří mají poruchy vnímání kůže nebo kožní abnormality.
6. Lidé, kteří užívají léky na předpis nebo bez předpisu.
7. Lidé, kteří mají abnormální krevní tlak.
8. Lidé, kteří nemohou dobrovolně vyjádřit své vědomí.
9. Lidé, kteří mají poruchy vnímání v důsledku vysokých poruch periferního krevního oběhu způsobených cukrovkou.
10. Lidé alergičtí na nerezovou ocel.

Použití je zakázáno za následujících okolností.

1. Lidé se zhoubným onemocněním
2. Lidé se sklonem ke krvácení.
3. Těhotné nebo rodící ženy.
4. Lidé s akutním hnisavým zánětem.
5. Lidé s kardiostimulátorem.
6. Lidé, kteří mají v těle kovové implantáty.
7. Používání přístroje v blízkosti srdce.

-Nepoužívejte jej v blízkosti srdce, horní části krku, hlavy, úst, genitálií, infikované kůže nebo chodidel. Kromě toho při používání netlačte na vnitřní orgány. V opačném případě může dojít k nehodám, které způsobí fyzické nepohodlí

-Nepoužívejte společně s jinými zdravotnickými pomůckami, protože to může způsobit nevolnost nebo fyzické nepohodlí.

-Nepoužívejte přístroj k jinému účelu, než ke kterému je určen a který je nastíněn v tomto návodu, protože může dojít k poruše nebo nehodám.

-Nepoužívejte jej k jiným masážním účelům, než které jsou zaznamenány v návodu, jinak může dojít k nehodám a poruchám.

Tento výrobek nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech:

1. Prostředí s přímým slunečním světlem.
2. Prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
3. V blízkosti vody.
4. Prašné prostředí.
5. V blízkosti kouře nebo ohně.
6. Prostředí, které je vystaveno opakovaným vibracím.
7. Místa se silným elektromagnetickým polem.